




gre

DMV Ultra™ / DMV 45™

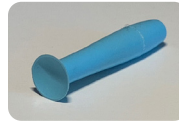

Για σκληρούς και αεροδιαπερατούς φακούς επαφής

Ενδεικνυόμενη χρήση

Οι εφαρμοστές DMV Ultra και DMV 45 έχουν σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκληρών και αεροδιαπερατών φακών επαφής. Ο εφαρμοστής DMV Ultra θα πρέπει να κρατείται κατακόρυφα και ο εφαρμοστής DMV 45 θα πρέπει να κρατείται υπό γωνία.

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

Αφαίρεση – Υγράνετε τη βεντούζα του DMV Ultra / DMV 45 και κατευθύνετε τη στο μάτι. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός επαφής έχει κεντραριστεί στο μάτι. Ευθυγραμμίστε τη βεντούζα μπροστά στον φακό και ακουμπήστε τη στο κέντρο του φακού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη. Αφαιρέστε τον φακό επαφής απευθείας από το μάτι. Μετά την αφαίρεση, σφύρετε προσεκτικά τον φακό επαφής από τη βεντούζα με μια πλάγια κίνηση.

Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον υγρό φακό επαφής στο ρηχό κοίλωμα που βρίσκεται στο στενό άκρο της λαβής. Ο υγρός φακός θα προσκολληθεί σε αυτήν τη θέση. Ακουμπήστε τον φακό στο μάτι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.

Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Ultra / DMV 45, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θέση του αφού στεγνώσει. Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.



Προφύλαξη: Αν ο εφαρμοστής προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι, σφύρετέ τον στη γωνία του ματιού και αφαιρέστε τον με μια περιστροφική κίνηση.



Προσοχή: Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.



Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού. Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νουσούντα ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.



Προσοχή: Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ**, που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.



ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Ultra / DMV 45 για ΜΑΛΑΚΟΥΣ ή υβριδικούς φακούς επαφής.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Διάθεση αποβλήτων

Η DMV Corporation συνιστά τα χρησιμοποιημένα προϊόντα της DMV να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τον χρόνο απόρριψης.

MD

Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως



Εισαγωγέας



Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F



Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή



Κατασκευαστής



Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης dmvcorp.com



Ημερομηνία κατασκευής



Χώρα παραγωγής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

