




nld

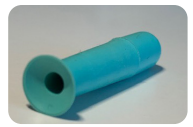

DMV CLASSIC™

Voor harde en zuurstofdoorlatende contactlenzen

Beoogd gebruik

Dit hulpmiddel is bedoeld voor het inzetten en verwijderen van harde en zuurstofdoorlatende contactlenzen.

Instructies voor gebruik

Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

VERWIJDEREN – Bevochtig de zuignap. Zorg dat de contactlens midden op het oog zit. Knijp in het zuigertje van de Classic en breng het naar het midden van de contactlens. Plaats het met behulp van een spiegel op het midden van de lens. Terwijl de Classic contact met de lens raakt, verlaagt u de druk op het zuigertje enigszins zodat de Classic vast komt te zitten aan de lens. Verwijder de contactlens recht van het oog. Knijp na verwijdering nogmaals in het zuigertje om de zuignap los te halen en verwijder de lens van de zuignap.

INZETTEN – Plaats de vochtige contactlens op de zuignap zonder in het zuigertje te knijpen. De vochtige lens zal aan de zuignap blijven zitten. Knijp NIET in het zuigertje als u de lens inzet. Plaats de contactlens recht op het oog.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

Schoon

Maak de DMV Classic na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. **Houd het luchtkanaal vrij van vuil.** Vervang het om de zes maanden.



Voorzorgsmaatregel: Als de DMV Classic per ongeluk vast komt te zitten aan het oog, knijpt u in het zuigertje om de zuigkracht op te heffen en het hulpmiddel van het oog te halen.



Waarschuwing: Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.



Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.



Waarschuwing: Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergen.



Gebruik de DMV Classic NIET voor ZACHTE of hybride contactlenzen.

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.



Medisch hulpmiddel



Beschermen tegen direct zonlicht



Importeur



Niet warmer bewaren dan 105°C / 220°F



Eén patiënt – meenvoudig gebruik



Fabricante



Volg de instructies
dmvcorp.com



Datum van fabricage



Land van vervaardiging



Gemachtigde vertegenwoordiger



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

