




hun

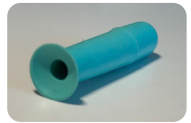

DMV CLASSIC™

Kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez

Alkalmazási terület

Ez az eszköz kemény és gázáteresztő kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál.

Használati utasítás

Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Eltávolítás – Nedvesítse meg a tapadókorongot. Ügyeljen arra, hogy a kontaktlencse a szem közepén legyen. Nyomja össze a Classic fogantyúját, és vezesse a kontaktlencse közepéhez. Tükör segítségével érintse a lencse elülső feléhez. Miközben a Classic hozzáér a lencséhez, kissé csökkentse a fogantyúra gyakorolt nyomást, hogy a Classic hozzátapadjon a lencséhez. Vegye ki a kontaktlencsét a szemből. Eltávolítás után nyomja meg ismét a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, és vegye le a lencsét a tapadókorongról.

Behelyezés – A fogantyú összenyomása nélkül helyezze a nedves kontaktlencsét a tapadókorongra. A nedves lencse feltapad a tapadókorongra. NE nyomja össze a fogantyút a lencse behelyezése során. Helyezze a kontaktlencsét közvetlenül a szemre.

Tisztítás

A DMV Classic eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Tartsa a légcserét szennyeződésektől tisztán. Félévente cserélje az eszközt



Elővigyázatosság: Ha a DMV Classic véletlenül a szemre tapadna, nyomja össze a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, majd távolítsa el a szemről.



Figyelem: Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrem, hajzsél, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



Figyelem: Fulladásveszély. Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



Figyelem: Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, **a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet**, mely ismert allergén.



NE használja a DMV Classic szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

Hulladékok ártalmatlanítása

A DMV Corporation azt javasolja, hogy az elhasznált DMV-termékek ártalmatlanítását az akkor éppen hatályos helyi szabályozások szerint végezzék.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Importőr



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Gyártó



Olvasa el a használati útmutatót. dmvcorp.com



Gyártás időpontja



A gyártó országa



Meghatalmazott képviselője



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

