




ron

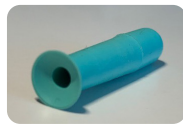

DMV CLASSIC™

Pentru lentile de contact rigide și gaz-permeabile

Utilizarea propusă

Acest dispozitiv este proiectat pentru aplicarea și scoaterea lentilelor de contact rigide și gaz-permeabile.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer.

Scoaterea – Umeziți ventuza. Asigurați-vă că lentila de contact este bine centrată pe ochi. Comprimați mânerul dispozitivului Classic și îndreptați-l spre centrul lentilei de contact.

Poziționați-l pe partea din față a lentilei timp ce vă uitați în oglindă. În timp ce dispozitivul Classic intră în contact cu lentila, eliberați ușor presiunea de pe mâner pentru a permite dispozitivului Classic să adere la lentilă. Scoateți lentila direct de pe ochi. După îndepărtarea lentilei, strângeți din nou mânerul pentru a elibera aspirația și a scoate lentila din ventuză.

Aplicarea – Așezați lentila de contact umezită pe ventuză, fără a strânge mânerul. Lentila umezită va adera la ventuză. NU strângeți mânerul în timp ce aplicați lentila. Puneți lentila de contact direct pe ochi. Respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact/medicului oftalmolog.

Curățarea

După fiecare utilizare, curățați dispozitivul DMV Classic cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer. După ce s-a uscat, păstrați dispozitivul în cutia sa.

Asigurați-vă mereu că în canalul de aer nu se află reziduuri. Aveți în vedere înlocuirea dispozitivului la fiecare șase luni.



Precăuție: În eventualitatea în care DMV Classic se lipește accidental de suprafața ochiului, strângeți mânerul pentru a elibera aspirația și a-l îndepărta de ochi.



Atenție: Nu lăsați acest produs în apropierea anumitor lichide, cum sunt cremele de mâini, gelurile de păr, produse pentru îndepărtarea lacului de unghii și agenți oxidanți puternici.



Atenție: Pericol de sufocare. Nu lăsați acest dispozitiv și toate celelalte dispozitive medicale la îndemâna copiilor mici. Nu se recomandă utilizarea acestui produs în caz de afecțiuni sau leziuni oculare. Dacă suferiți de iritații oculare, tulburări de vedere neobișnuite sau durere la nivelul ochilor, consultați specialistul oftalmolog.



Atenție: Deși nu există dovezi privind probleme de alergii asociate cu acest produs, **produsul conține cauciuc natural uscat. Nu conține latex lichid, un alergen cunoscut.**



NU utilizați DMV Classic pentru lentilele de contact MOI sau hibride.

Dacă ați fost implicat în orice fel de incident grav asociat cu acest dispozitiv, raportați acest lucru producătorului. Dacă sunteți rezident în UE, raportați incidentul către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți stabilit.

Acest produs le permite purtătorilor de lentile de contact să își aplice și/sau să își scoată lentilele, pentru a le utiliza în conformitate cu scopul propus al acestora. Prin urmare, acest produs este considerat un dispozitiv medical..

Eliminarea deșeurilor

DMV Corporation recomandă eliminarea produselor DMV utilizate în conformitate cu reglementările locale în vigoare în momentul eliminării.



Acest produs este un dispozitiv medical.



A se proteja de radiația solară directă



Importator



A nu se depozita la temperaturi mai mari de 105°C / 220°F



Un singur pacient - mai multe utilizări



Producător



A se citi instrucțiunile de utilizare dmvcorp.com



Data de fabricație



Tara de fabricație



Reprezentant autorizat



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

