




hrv

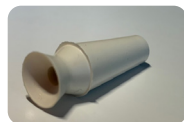

DMV Vented Scleral Cup™

Za hibridne i skleralne kontaktne leće

Namjena

DMV Vented Scleral Cup namijenjen je za umetanje hibridnih i skleralnih kontaktne leća.

Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Umetanje – Kroz pomagalo prolazi zračni kanal koji onemogućuje sukuciju. To omogućuje da se kontaktna leća postavi u oko bez priljublivanja za pomagalo. Držite pomagalo u okomitom položaju i postavite kontaktnu leću na sukucijsku čašicu. Kada umećete hibridne ili skleralne leće, pazite da ste leću napunili odobrenom otopinom. Pažljivo prinesite pomagalo k otvorenom oku i uz pomoć zrcala lećom dotaknite oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

SVAKIPUT nakon uporabe pomagalo DMV Vented Scleral Cup očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. **Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća.** Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

Mjere opreza: Ako pomagalo slučajno primijenite na površini oka, samo ga povucite od oka jer nema sukucije. Izbjegavajte klizanje pomagalom po površini oka

Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

Ovaj proizvod NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ZA UKLANJANJE kontaktnih leća.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Uvoznik



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220 °F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Proizvajalec



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Ovlašteni predstavnik



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gothardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

