




slv

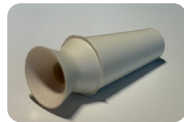

# DMV Vented Scleral Cup™

## Za hibridne in skleralne kontaktne leče

### Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Vented Scleral Cup je izdelan za vstavljanje hibridnih in skleralnih kontaktnih leč.

### Navodila za uporabo



Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Vstavljanje – Skozi pripomoček je speljan zračni kanal, ki omogoča prekinitev sesanja. Zaradi tega je kontaktno lečo mogoče namestiti v oko, ne da bi se ta sprijela s pripomočkom. Držite pripomoček v navpičnem položaju in namestite kontaktno lečo v prisesek. Pri vstavljanju hibridnih ali skleralnih leč morajo biti leče napolnjene z odobreno tekočino. Previdno dvignite pripomoček k odprtemu očesu in se z lečo dotaknite očesa; pri tem si pomagajte z ogledalom.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

### Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček DMV Vented Scleral Cup očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. **Pazite, da v zračnem kanalu ne bo delcev.** Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



**Previdnostni ukrep:** Če pripomoček nenamerno namestite na površino očesa, ga preprosto povlecite stran od očesa, saj ni prisotna sesalna sila. S pripomočkom ne smete drseti po površini očesa.



**Opozorilo:** Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



**Opozorilo: Nevarnost zadušitve.** Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



**Opozorilo:** Čeprav ni dokazov za težave z alergijami in povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, **da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa**, ki je znan alergen.



**Tega pripomočka NE UPORABLJAJTE za ODSTRANJEVANJE kontaktnih leč.**

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.

### Odstranjevanje odpadkov

DMV Corporation priporoča, da uporabljene izdelke DMV odstranite skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo v času odlaganja.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Uvoznik



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Proizvajalec



Preberite navodila za uporabo. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Pooblaščen zastopnik



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

