




bul

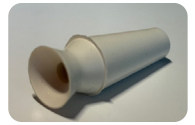

DMV Vented Scleral Cup™

За хибридни и склерални контактни лещи

Показана употреба

DMV Vented Scleral Cup склералната чашка с отвор е предназначена за поставяне на хибридни и склерални контактни лещи..

Инструкции за употреба

Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

Поставяне – Сърцевината на изделието е снабдена с празно каналче, чрез което се спира сукцията. Това позволява контактната леща да бъде поставена върху окото без да залепва към изделието.

Дръжте изделието във вертикално положение и поставете контактната леща в сукционната чашка. Преди поставяне на хибридни или склерални лещи трябва да изпълните лещите с одобрен разтвор. Вдигнете внимателно изделието към отвореното око и допрете лещата до окото, като използвате огледало.

Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офталмолог.

Почистяване

След всяка употреба на DMV Vented Scleral Cup, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. **Кухото каналче трябва да се пази чисто от частици.** Изделието трябва да се заменя с ново на всеки шест месеца.

Предпазни мерки: Ако по случайност допрете изделието върху повърхността на окото, просто отдръпнете апликатора от окото, защото при него няма сукция. Избягвайте да плъзгате изделието върху повърхността на окото.

Внимание: Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.

Внимание: Опасност от задавяне. Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото, зрително нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.

Внимание: Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ това изделие ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ на контактни лещи.

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

Изхвърляне на отпадъци

DMV Corporation препоръчва използваните DMV продукти да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, действащи по времето на изхвърлянето.

Този продукт е медицинско изделие

Да се предпазва от пряка слънчева светлина

Вносител

Да не се съхранява при температура над 105°C / 220°F

За многократна употреба при един пациент

производител

Прочетете инструкциите за употреба dmvcorp.com

Дата на производство

Страна на производство

Упълномощен представител

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA