




Ces

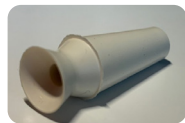

# DMV Vented Scleral Cup™

## Pro hybridní a sklerální kontaktní čočky

### Zamýšlené použití

Nástroj DMV Vented Scleral Cup je konstruován pro nasazování hybridních a sklerálních kontaktních čoček.

### Návod k použití

Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Nasazení – Nástrojem prochází vzduchový kanálek, který znemožňuje přísátí. Dovoluje tak umístit kontaktní čočky do oka bez přilnutí k nástroji.

Nástroj držte ve svislé poloze a kontaktní čočku umístěte do přísavky. Při nasazování hybridních či sklerálních čoček zajistěte naplnění čoček schváleným roztokem. Opatrně nástroj zdvihněte k otevřenému oku a zaveďte čočky do oka dotykem pomocí zrcátka.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

### Čištění

Pokračně po použití nástroje DMV Vented Scleral Cup jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. **Ve vzduchovém kanálku nesmí být nečistoty.** Plánujte jeho výměnu každých šest měsíců.

**Bezpečnostní opatření:** Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka vyjměte, protože nedochází k žádnému přisávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.

**Upozornění:** Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.

**Upozornění: Nebezpečí udušení.** Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.

**Upozornění:** I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, **že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex,** což je známý alergen.

**Tento nástroj NEPOUŽÍVEJTE K VYJÍMÁNÍ kontaktních čoček.**

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

### Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem

105°C  
220°F  
Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220°F

Přečtěte si návod k použití  
dmvcorp.com

Chraňte před přímým slunečním světlem

Jeden pacient – vícenásobné použití

Datum výroby

Dovozce

Výrobce

Země výroby

Zplnomocněný zástupce

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK