




DMV CLASSIC™

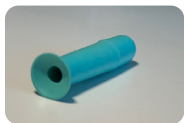

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibsin u li Jgħaddi l-Gass Minnhom

Użu Intenzjonat

Dan it-tagħmir huwa ddisinjat għal biex wieħed idahħal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt ibsin u li jgħaddi l-gass minnhom.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħhija – Xarrab kemxejn it-tazza tal-ġbid tal-arja. Kun żgur li l-lenti tal-kuntatt hija ċċentrata fuq l-għajn. Ikkompressa l-manku tal-Classic u mexxieh lejn iċ-ċentru tal-lenti tal-kuntatt. Missu man-naħa ta' quddiem tal-lenti billi tuża mera. Waqt li l-Classic ikun qed imiss mal-lenti, erfi ħarira l-pressjoni fuq il-manku sabiex il-Classic jeħel mal-lenti. Aqla' l-lenti tal-kuntatt direttament minn mal-għajn. Wara t-tneħhija, erġa' aghfas il-manku biex terfi l-ġbid tal-arja u tneħhi l-lenti mit-tazza tal-ġbid tal-arja

Inserzjoni – Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarra fuq it-tazza mingħajr ma tikkompressa l-manku. Il-lenti mxarra se teħel mat-tazza. TAGĦFASX il-manku waqt li tkun qed iddahħal il-lenti. Poġġi l-lenti tal-kuntatt direttament fuq l-għajn.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Classic, naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali. Ahżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. **Żomm il-kanal tal-arja hieles mill-fdalijiet.** Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk id-DMV Classic jeħel aċċidentalment mal-għajn, aghfas il-manku biex terfi l-ġbid tal-arja u tneħhieh minn mal-għajn.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħhija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti **qawwijin**.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfal żgħar.

Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiġħ fil-vista mhux tas-soġtu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Ghalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fiħ gomma naturali xotta. Ma fiħ latex likwidu**, allergen magħruf.



TUŻAX DMV Classic għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.

Jekk kellek kwalunkwe incident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-incident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fiħ.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew ineħhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wieħed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands