




DMV CLASSIC™

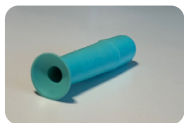

## Za tvrde i plinopropusne kontaktne leće

### Namjena

Ovo pomagalo namijenjeno je za umetanje i uklanjanje tvrdih i plinopropusnih kontaktnih leća.

### Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-nim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

**Uklanjanje** – Navlažite sukcijisku čašicu. Provjerite da je kontaktna leća u oku smještena centralno. Stisnite ručku pomagala DMV Classic i prinesite ga do sredine kontaktne leće. Dodirnite prednju stranu kontaktnih leće dok se gledate u ogledalo. Dok pomagalo DMV Classic dodiruje leću, otpustite pritisak na dršku kako biste omogućili da se pomagalo DMV Classic priljubi za leću. Uklonite leću izravno iz oka. Nakon uklanjanja leće stisnite ponovno dršku kako bi se otpustio negativan tlak (sukcija) i leća odvojila od sukcijiske čašice.

**Umetanje** – Postavite navlaženu kontaktnu leću na čašicu bez stiskanja ručke. Vlažna leća će se priljubiti za čašicu. **NEMOJTE** stiskati ručku dok umećete leću. Umetnite kontaktnu leću izravno u oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

### Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo DMV Maxi Cup očistite 70 %-nim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. **Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća.** Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



**Mjere opreza:** Ako se pomagalo DMV Classic slučajno zalijepi za oko, stisnite dršku i odvojiti će se od oka.



**Oprez:** Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



**Oprez: Opasnost od gušenja.** Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosegma male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



**Oprez:** Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



**DMV Classic NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.**

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum proizvodnje



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands