




Remover end

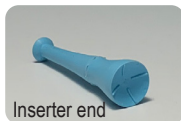

Inserter end

## DMV Versa™

### Piesūcektnis sklēras kontaktlēcu izņemšanai/ielikšanai

#### Paredzētā izmantošana

DMV Versa ir paredzēts sklēras kontaktlēcu ielikšanai un izņemšanai.

#### Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet DMV Versa piesūcekņa kausiņu (mazākais gals) ar fizioloģisko šķīdumu, virziet to acī un novietojiet pretī sklēras kontaktlēcai netālu no malas. Lēnām velciet lēcu virzienā prom no acs. Šī darbība vājinās lēcas sasaisti un lēca atbrīvosies no acs. Pēc izņemšanas uzmanīgi noslidiniet kontaktlēcu uz sāniem no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro sklēras lēcu uz Versa lielākā gala, kuram lēca nedaudz pielīps. Ar otru roku turiet atvērtus acs plakstiņus un ielieciet sklēras kontaktlēcu acī. Tiklīdz lēca ir pielīpusi acij, izņemiet DMV Versa. Valnīši kausiņā nodrošina piepacceltu virsmu, uz kuras balstās lēca, un novērš lēcas pielīpšanu Versa. Lai kontrolētu procesu, skatieties spogulī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

#### Tīrīšana

Pēc katras ierīces izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Ieplānojiet tās nomaiņu reizi sešos mēnešos.



**Uzmanību!** Ja DMV Versa nejauši pielīp acij ar mazo galu (piesūcekņa kausiņš), bīdiert to uz acs kaktiņu un ar pagrieziena kustību izņemiet to. Ja DMV Versa nejauši pielīp pie acs ar lielo galu (atbalsta plāksnīte), vienkārši izņemiet to no acs, jo tā nepiesūcas virsmai.



**Brīdinājums.** Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķīdumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



**Brīdinājums. Aizrišanās risks.** Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



**Brīdinājums.** Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.



**NELIETOJIET DMV Versa MĪKSTO vai hibrīda kontaktlēcu izņemšanai.**

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Ražošanas datums



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands