




nld

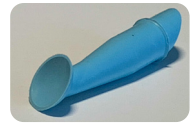

DMV Ultra™ / DMV 45™

Voor harde en zuurstofdoorlatende contactlenzen

Beoogd gebruik

De DMV Ultra en DMV 45 zijn beide ontworpen voor het inzetten en verwijderen van harde en zuurstofdoorlatende contactlenzen. De DMV Ultra dient verticaal te worden vastgehouden en de DMV 45 in een hoek.

Instructies voor gebruik

Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

VERWIJDEREN – Bevochtig de zuignap van de DMV Ultra / DMV 45 en breng die naar het oog. Zorg dat de contactlens midden op het oog zit. Breng de zuignap op één lijn met de voorkant van de lens en plaats deze met behulp van een spiegel midden op de lens. Verwijder de contactlens recht van het oog. Schuif de contactlens na verwijdering voorzichtig zijwaarts van de zuignap.

INZETTEN – Plaats de vochtige contactlens op het ondiepe kuiltje in het nauwe uiteinde van het zuigertje. De vochtige lens zal in deze positie blijven zitten. Plaats de lens op het oog.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

Schoon

Maak de DMV Ultra / DMV 45 na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Maak het hulpmiddel droog en bewaar het in zijn doosje. Vervang het om de zes maanden.



Voorzorgsmaatregel: Als het hulpmiddel per ongeluk vast komt te zitten aan het oog, schuift u het naar de ooghoek en verwijdert u het terwijl u draait.



Waarschuwing: Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.



Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.



Waarschuwing: Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.



Gebruik de DMV Ultra / DMV 45 NIET voor ZACHTE of hybride contactlenzen.

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.



Medisch hulpmiddel



Beschermen tegen direct zonlicht



Importeur



Niet warmer bewaren dan 105°C / 220° F



Eén patiënt – meervoudig gebruik



Fabricante



Volg de instructies
dmvcorp.com



Datum van fabricage



Land van vervaardiging



Gemachtigde vertegenwoordiger



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

