




nor

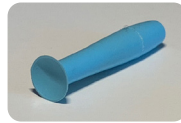

DMV Ultra™ / DMV 45™

For Harde og gasspermeable kontaktlinser

Avsedd anvending

DMV Ultra og DMV 45 er begge designet for å sette inn og fjerne harde og gasspermeable kontaktlinser. DMV Ultra bør holdes vertikalt og DMV 45 holdes i en vinkel.

Bruksanvisning



Enheden skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

FJERNING – Fukt sugeskoppen på DMV Ultra / DMV 45 og før den til øyet. Forsikre deg om at kontaktlinser er sentrert på øyet. Innrett sugeskoppen foran på linsen og berør linsen midt på ved hjelp av et speil. Ta kontaktlinser rett ut av øyet. Skyv kontaktlinser forsiktig sidelengs fra sugeskoppen etter fjerning.

INNSETTING – Plasser den våte kontaktlinser i den grunne fordybningen på den smale enden av håndtaket. Den våte linsen vil feste seg i denne posisjonen. Berør linsen mot øyet.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

Rengjøring

Rengjør DMV Ultra / DMV 45 etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. Planlegg å erstatte den hver sjettemåned.



Forholdsregel: Hvis enheten ved et uhell festes til øyet, skyver du den til øyekroken og fjerner den ved å vri den.



Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



IKKE bruk DMV Ultra / DMV 45 til MYKE eller hybride kontaktlinser.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

Avfallshåndtering

DMV Corporation anbefaler å kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Importør



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 °F



Enkeltpasient - flerbruk



Produsent



Les bruksanvisningen dmvcorp.com



Produksjonsdato



Produksjonsland



Autorisert representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

