




deu

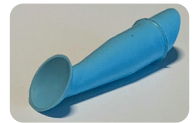

## DMV Ultra™/DMV45™

### Für harte und gaspermeable Kontaktlinsen

#### Verwendungszweck

DMV Ultra und DMV 45 eignen sich zum Auf- und Absetzen von harten (formstabilen) und gaspermeablen Kontaktlinsen. Halten Sie den DMV Ultra senkrecht und den DMV 45 in einem Winkel von etwa 45°.

#### Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie den DMV Ultra / DMV 45 Sauger vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**ABSETZEN** – Benetzen Sie die Saugfläche des DMV Ultra / DMV 45 mit Kochsalzlösung und führen ihn an das Auge. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kontaktlinse zentriert vor der Pupille sitzt. Setzen Sie die Saugfläche parallel und zentriert auf die Kontaktlinsenoberfläche während Sie in einen Spiegel schauen. Nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge, indem Sie den Sauger vom Auge wegführen. Um die Kontaktlinse vom Sauger zu lösen, ziehen Sie die Kontaktlinse seitlich vom Sauger.

**AUFSETZEN** – Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse in die flache Mulde am schmalen Ende des Saugergriffes. Die benetzte Kontaktlinse wird dort haften. Führen Sie den Sauger mit der Kontaktlinse zum Auge und setzen Sie sie vorsichtig in die Mitte der Hornhaut vor die Pupille.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

#### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Ultra / DMV 45 Sauger nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren Sie ihn seinem Behälter auf. Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.

**Vorsichtsmassnahme:** Falls das Produkt versehentlich die Augenoberfläche berührt und dort haftet, schieben Sie den Sauger seitlich zum Augenwinkel und nehmen Sie ihn in mit einer leichten Drehbewegung ab.

**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.

**Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.

**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.

Verwenden Sie den DMV Ultra / DMV 45 Sauger **NICHT für weiche Kontaktlinsen und Hybrillinsen**.

Für den Fall, dass Sie einen ernsthaften Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benützen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

#### Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Importeur



Nicht über 105°C aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten  
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Herstellungsland



Bevollmächtigter Vertreter



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

