




slk

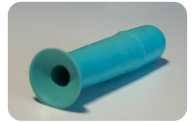

DMV Classic™

Pre pevné a pre plyn permeabilné kontaktné šošovky

Účel použitia

Táto pomôcka je navrhnutá na vkladanie a vyberanie tvrdých a pre plyn permeabilných kontaktných šošoviek.

Návod na použitie

Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Navlhčite prísavku. Zaisťte, aby bola kontaktná šošovka v strede oka. Stlačte úchytku pomôcky DMV Classic a zaveďte ju do stredu kontaktnej šošovky. Pri pohľade do zrkadla sa dotknite prednej časti kontaktnej šošovky. Zatiaľ čo sa pomôcka DMV Classic dotýka šošovky, jemne uvoľnite tlak na úchytku, čím sa pomôcka DMV Classic prisaje na šošovku. Vyberte kontaktnú šošovku priamo z oka. Po vybratí znovu stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a odoberte šošovku z prísavky.

Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku do jamky bez toho, aby ste stlačili úchytku. Mokrú šošovku priľne k jamke. Počas vkladania šošovky NESTLÁČAJTE úchytku. Vložte kontaktnú šošovku priamo do oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Classic ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

Opatrenie: Ak pomôcka DMV Classic nechcete priľne k oku, stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a vyberte pomôcku z oka.

Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odľakovač a silné oxidačné látky.

Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojím očným lekárom.

Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.

NEpoužívajte DMV Classic na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chrňte pred priamym slnečným žiarením.



Dovozca



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C / 220 °F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Výrobca



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Dátum výroby



Krajina výroby



Splnomocnený zástupca



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

