




slv

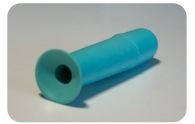

DMV Classic™

Za trde in plinoprepustne kontaktne leče

Predvidena uporaba

Ta pripomoček je izdelan za vstavljanje in odstranjevanje trdih in plinoprepustnih kontaktnih leč.

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Odstranjevanje – Navlažite prisesek. Priprčajte se, da je kontaktna leča na sredini očesa. Stisnite ročico pripomočka DMV Classic in ga vodite proti sredini kontaktne leče. S pripomočkom se dotaknite sprednjega dela leče; pri tem si pomagajte z ogledalom. Ko se pripomoček DMV Classic dotakne leče, rahlo popustite pritisek na ročici, da se bo pripomoček DMV Classic oprjel leče. Nato lečo potegnite naravnost stran od očesa. Po odstranitvi ponovno stisnite ročico, da prekinete sesanje, ter odstranite lečo s prisjeska.

Vstavljanje – Namestite vlažno kontaktno lečo na prisesek, ne da bi pri tem stisnili ročico. Vlažna leča se bo v tem položaju oprjela prisjeska. Med vstavljanjem leče NE stiskajte ročice. Pazite, da v zračnem kanalu ne bo delcev. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček DMV Classic očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. **Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui.** Pazite, da v zračnem kanalu ne bo delcev. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



Predvidnostni ukrep: Če se pripomoček DMV Classic nenamerno oprime očesa, stisnite ročico, da prekinete sesanje, nato pa pripomoček odstranite od očesa.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, **da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa**, ki je znan alergen.



Pripomočka DMV Classic NE uporabljajte za MEHKE ali hibridne kontaktne leče.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.

Odstranjevanje odpadkov

DMV Corporation priporoča, da uporabljene izdelke DMV odstranite skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo v času odlaganja.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Uvoznik



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Proizvajalec



Preberite navodila za uporabo. dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Pooblaščen zastopnik



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gothardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

