




nld

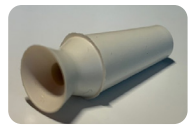

DMV Vented Scleral Cup™

Voor hybride en sclerale contactlenzen

Beoogd gebruik

De DMV Vented Scleral Cup is bedoeld voor het inzetten van hybride en sclerale contactlenzen.

Instructies voor gebruik

Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

INZETTEN – Er loopt een luchtkanaal door het hulpmiddel om de zuigkracht op te heffen. Hierdoor kan een contactlens op het oog worden aangebracht zonder dat deze vastzit aan het hulpmiddel.

Houd het hulpmiddel in een verticale stand en plaats de contactlens op de zuignap. Vul de lens bij het inzetten van hybride of sclerale lenzen met een goedgekeurde oplossing. Breng het hulpmiddel voorzichtig omhoog naar het geopende oog en plaats de lens met behulp van een spiegel op het oog.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

Schoon

Maak de DMV Vented Scleral Cup na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. **Houd het luchtkanaal vrij van vuil.** Vervang het om de zes maanden.



Voorzorgsmaatregel: Als u het hulpmiddel per ongeluk op het oogoppervlak plaatst, hoeft u het enkel van het oog te halen want er is geen zuigkracht. Schuif het hulpmiddel niet over het oppervlak van het oog.



Waarschuwing: Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.



Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.



Waarschuwing: Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.



GEBRUIK dit hulpmiddel NIET VOOR HET VERWIJDEREN van contactlenzen.

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.



Medisch hulpmiddel



Beschermen tegen direct zonlicht



Importeur



Niet warmer bewaren dan 105°C / 220° F



Eén patiënt – meervoudig gebruik



Fabricante



Volg de instructies dmvcorp.com



Datum van fabricage



Land van vervaardiging



Gemachtigde vertegenwoordiger



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

