




ita

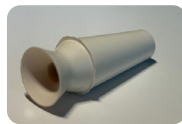

DMV Vented Scleral Cup™

Per applicare le lenti ibride e sclerali

Utilizzazione

DMV Vented Scleral Cup è adatto per applicare le lenti ibride e sclerali.

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il DMV Vented Scleral Cup per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

INSERIMENTO – Un canale dell'aria attraverso il dispositivo per disattivare l'aspirazione. In questo modo è possibile posizionare una lente a contatto sull'occhio senza attaccarsi al dispositivo. Tenete il dispositivo in posizione verticale e posizionate la lente a contatto nella ventosina. Assicuratevi di riempire la lente a contatto con una soluzione approvata quando si applica lenti ibride o sclerali. Sollevate delicatamente il dispositivo verso l'occhio aperto e applicare la lente con l'aiuto di uno specchio.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Vented Scleral Cup con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. **Mantenere il canale dell'aria libero da detriti.** Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.

Attenzione: Se il prodotto tocca e aderisce accidentalmente alla superficie dell'occhio, sufficiente ritrarlo dall'occhio, poiché non è presente l'aspirazione. Evitare di far scorrere la DMV Vented Scleral Cup sulla superficie dell'occhio.

Attenzione: Tenere la DMV Ultra / DMV 45 lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti

Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.

Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.

Non utilizzare questo prodotto per rimuovere le lenti a contatto.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.

Smaltimento dei rifiuti

DMV Corporation consiglia di smaltire i prodotti DMV usati secondo le normative locali in vigore al momento dello smaltimento.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Importatore



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Produttore



Seguire le istruzioni per l'uso dmvcorp.com



Data di produzione



Paese di Produzione



Rappresentante autorizzato



EU
Bilos Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

