




est

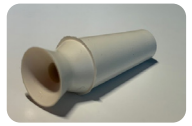

DMV Vented Scleral Cup™

Hübridsete ja skleraalseste kontaktläätsede jaoks

Sihotstarve

DMV Vented Scleral Cup on mõeldud hübridsete ja skleraalseste kontaktläätsede paigaldamiseks.

Kasutusjuhend

Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Paigaldamine – Vaakumi tühistamiseks on seadmel õhukanal. See võimaldab kontaktläätsel silma paigaldamist, ilma et see seadme külge kinnituks. Hoidke seadet vertikaalses asendis ja asetage kontaktlääts iminapale. Hübridsete või skleraalseste kontaktläätsede paigaldamisel veenduge, et kontaktlääts oleks täidatud sobiva lahusega. Viige seade ettevaatlikult avatud silma juurde ja asetage kontaktlääts peegli abil silma.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Vented Scleral Cup kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. **Hoidke õhukanal prügivaba.** Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.

Ettevaatusabinõud: Kui seade satub kogemata silma pinnale, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna vaakumit ei ole. Vältige seadme libistamist üle silma pinna.

Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.

Hoiatus: Lämmisohoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.

Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.

ÄRGE KASUTAGE seda seadet kontaktläätsede eemaldamiseks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeaks.

Jäätmekäitlus

DMV Corporation soovib kasutatud DMV tooted utiliseerida vastavalt jäätmekäitluse ajal kehtivatele kohalikele eeskirjadele.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Maaletuoja



Hoida temperatuuril kuni 105 °C/220 °F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Tootja



Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Tootja riik



Autoriseeritud esindaja



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

