




fra

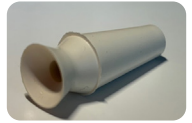

DMV Vented Scleral Cup™

Pour l'insertion de lentilles de contact hybrides et sclérales

But de l'utilisation

Le DMV Vented Scleral Cup est conçu pour l'insertion de lentilles de contact hybrides et sclérales.



Mode d'emploi

Avant d'utiliser le DMV Vented Scleral Cup pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

INSERTION – Un canal d'air traverse l'appareil pour désactiver la succion. Cela permet de placer une lentille de contact sur l'œil sans adhérer au dispositif. Maintenez le dispositif en position verticale et placez la lentille de contact dans la ventouse. Veillez à remplir la lentille avec une solution approuvée lorsque vous insérez des lentilles hybrides ou sclérales. Soulevez délicatement le dispositif vers l'œil grand ouvert et mettez la lentille en contact avec l'œil à l'aide d'un miroir.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

Nettoyage

Après chaque utilisation de la DMV Vented Scleral Cup, nettoyez-la avec de l'alcool et laissez-la sécher à l'air libre. Conservez l'appareil dans son étui après l'avoir séché, en veillant à ce que le canal d'air soit exempt de débris. Prévoyez de le remplacer tous les six mois.



Précaution: Si vous appliquez l'appareil à la surface de l'œil, retirez-le simplement de l'œil, car il n'y a pas d'aspiration. Évitez de faire glisser l'appareil sur la surface de l'œil.



Considération: Tenir le DMV Ultra /DMV 45 éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.



Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rougi, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.



Considération: Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, le **matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.



N'UTILISEZ PAS ce dispositif POUR LE RETRAIT des lentilles de contact.

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.

Élimination des déchets

DMV Corporation recommande d'éliminer les produits DMV usagés conformément aux réglementations locales en vigueur au moment de l'élimination.



Dispositif médical



Protéger du soleil direct



Importateur



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Un seul patient – à usage multiple



Fabricant



Suivez les instructions d'utilisation
dmvcorp.com



Date de fabrication



Pays de fabrication



Représentant autorisé



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

