




gre

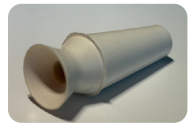

## DMV Vented Scleral Cup™

### Για υβριδικούς και σκληρικούς φακούς επαφής

#### Ενδεικνυόμενη χρήση

Ο εφαρμοστής DMV Vented Scleral Cup έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση υβριδικών και σκληρικών φακών επαφής.

#### Οδηγίες χρήσης



Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

Εισαγωγή – Ένας δίαυλος αέρα διατρέχει τον εφαρμοστή για να σταματήσει την αναρρόφηση. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση του φακού επαφής στο μάτι χωρίς αυτός να προσκολληθεί στον εφαρμοστή.

Κρατήστε τον εφαρμοστή σε κάθετη θέση και τοποθετήστε τον φακό επαφής στη βεντούζα. Κατά την εισαγωγή υβριδικών ή σκληρωτικών φακών, βεβαιωθείτε ότι γεμίζετε τον φακό με εγκεκριμένο διάλυμα. Φέρτε προσεκτικά τον εφαρμοστή στο ανοιχτό μάτι και ακουμπήστε τον φακό στο μάτι χρησιμοποιώντας καθρέφτη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.

#### Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Vented Scleral Cup, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. **Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στον δίαυλο αέρα.** Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.



**Προφύλαξη:** Αν ακουμπήσετε κατά λάθος τον εφαρμοστή στην επιφάνεια του ματιού, απλώς απομακρύνετε τον από το μάτι, καθώς δεν υπάρχει αναρρόφηση. Μη σύρετε τον εφαρμοστή πάνω στην επιφάνεια του ματιού.



**Προσοχή:** Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.



**Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού.** Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νοσούντα ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμιάτρο σας.



**Προσοχή:** Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ,** που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.



**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** αυτόν τον εφαρμοστή **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ** φακών επαφής.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

#### Διάθεση αποβλήτων

Η DMV Corporation συνιστά τα χρησιμοποιημένα προϊόντα της DMV να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τον χρόνο απόρριψης.



Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως



Εισαγωγέας



Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F



Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή



Κατασκευαστής



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Ημερομηνία κατασκευής



Χώρα παραγωγής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

