




slk

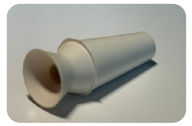

DMV Vented Scleral Cup™

Pre hybridné a sklerálne kontaktné šošovky

Účel použitia

DMV Vented Scleral Cup je navrhnutý na vkladanie hybridných a sklerálnych kontaktných šošoviek.

Návod na použitie

Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vkladanie – Cez pomôcku vedie vzduchový kanál, ktorý znemožňuje satie. To umožňuje vloženie kontaktnej šošovky do oka bez príľnutia k pomôčke. Držte pomôcku vo vertikálnej polohe a položte kontaktnú šošovku na prísavku. Pri vkladani hybridných alebo sklerálnych šošoviek zaistíte, že ste šošovku naplnili schváleným roztokom. Pred zrkadlom opatrne zdvihnite pomôcku k otvorenému oku a šošovkou sa dotknite oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očnénoho špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Vented Scleral Cup ju vyčistíte 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

Opaterenie: Ak nechcete aplikujete pomôcku na povrch oka, jednoducho ju odoberte, pretože nedochádza k prísatiu. Vyhnite sa posúvaniu pomôcky po povrchu oka.

Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.

Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.

Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.

NEPOUŽÍVAJTE túto pomôcku na VYBERANIE kontaktných šošoviek.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladať a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.

Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F

Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Jeden pacient - Viacnásobné použitie

Dátum výroby

Dovožca

Výrobca

Krajina výroby

Splnomocnený zástupca

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK