





nld

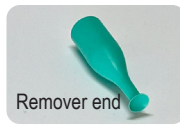

Remover end

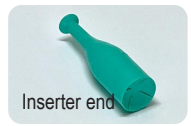

Inserter end

## DMV Versa™

### Verwijderaar/inzethulp van sclerale contactlenzen

#### Beoogd gebruik

De DMV Versa is bedoeld voor het inzetten en verwijderen van sclerale contactlenzen.

#### Instructies voor gebruik

⚠️ Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

**VERWIJDEREN** – Bevochtig de zuignap (het smallere uiteinde) van de DMV Versa met een fysiologische zoutoplossing, breng deze naar het oog en plaats de zuignap op de voorkant van de sclerale contactlens, nabij de rand. Trek de lens langzaam af van het oog. Hierdoor wordt de hechting van de lens langzaam losser en komt de lens los van het oog. Schuif de contactlens na verwijdering voorzichtig zijwaarts van de zuignap.

**INZETTEN** – Plaats een vochtige sclerale lens op het brede uiteinde van de Versa waar de lens gemakkelijk blijft zitten. Houd de oogleden met de andere hand open en plaats de sclerale contactlens op het oog. Verwijder de DMV Versa zodra de lens op het oog zit. De ribbels in de zuignap hebben tot doel om de lens te laten rusten op een verheven oppervlak en te voorkomen dat de lens vastkleeft aan de Versa. Gebruik een spiegel als leidraad.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

#### Schoon

Maak het hulpmiddel na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. Vervang het om de zes maanden.



**Voorzorgsmaatregel:** Als de DMV Versa per ongeluk met het smalle uiteinde (zuignap) vast komt te zitten aan het oog, schuift u deze naar de ooghoek en verwijdert u het hulpmiddel terwijl u draait. Als de DMV Versa per ongeluk met het brede uiteinde (steunpootje) vast komt te zitten aan het oog, hoeft u het hulpmiddel enkel van het oog te halen want dit uiteinde heeft geen zuigkracht.



**Waarschuwing:** Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.



**Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen.** Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.



**Waarschuwing:** Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.



**Gebruik de DMV Versa NIET voor het verwijderen van ZACHTE of hybride contactlenzen.**

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

#### Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.



Medisch hulpmiddel



Beschermen tegen direct zonlicht



Importeur



Niet warmer bewaren dan 105°C / 220°F



Eén patiënt – meervoudig gebruik



Fabricante



Volg de instructies  
dmvcorp.com



Datum van fabricage



Land van vervaardiging



Gemachtigde vertegenwoordiger



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

