





slv

DMV Versa™

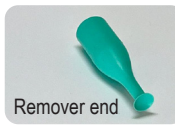

Remover end

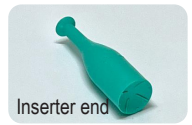

Inserter end

## Pripomoček za odstranjevanje/vstavljanje skleralnih kontaktnih leč

### Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Versa je izdelan za vstavljanje in odstranjevanje skleralnih kontaktnih leč.

### Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

**Odstranjevanje** – Navlažite privesek (manjši konec) pripomočka DMV Versa s fiziološko raztopino. Vodite ga proti očesu in ga namestite na sprednji del skleralne kontaktne leče, v bližino roba. Počasi povlecite lečo stran od očesa. Na ta način boste sprostili oprijem leče, tako da se bo ločila od očesa. Po odstranitvi previdno potisnite lečo stran s priveska.

**Vstavljanje** – Namestite vlažno skleralno lečo na večji konec pripomočka Versa; leča se ga bo nežno oprijela. Z drugo roko držite veke razprte in vstavite skleralno lečo v oko. Ko se leča oprime očesa, odstranite pripomoček DMV Versa. Rebra na privesku tvorijo privzdignjeno površino, na kateri leča počiva, in preprečujejo, da bi se leča prilepila na pripomoček Versa. Za lažje vodenje si pomagajte z ogledalom. Ravnejte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

### Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



**Previdnostni ukrep:** Če se pripomoček DMV Versa nenamerno z manjšim koncem (priveskom) oprime očesa, ga potisnite proti koticu očesa in zavrtite, da ga odstranite. Če se pripomoček DMV Versa nenamerno z večjim koncem (oporno blazinico) oprime očesa, ga preprosto povlecite stran od očesa, saj ni prisotna sesalna sila.



**Opozorilo:** Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



**Opozorilo: Nevarnost zadušitve.** Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosegaj majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



**Opozorilo:** Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



**Pripomočka DMV Versa NE uporabljajte za odstranjevanje MEHKIH ali hibridnih kontaktnih leč.**

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.

### Odstranjevanje odpadkov

DMV Corporation priporoča, da uporabljene izdelke DMV odstranite skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo v času odlaganja.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Uvoznik



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220°F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Proizvajalec



Preberite navodila za uporabo. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Pooblaščen zastopnik



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emerge Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emerge Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

